


KARTS AUTONOMES


Votre équipement. Plus libre.

Deux unités mobiles. Deux fonctions complémentaires.

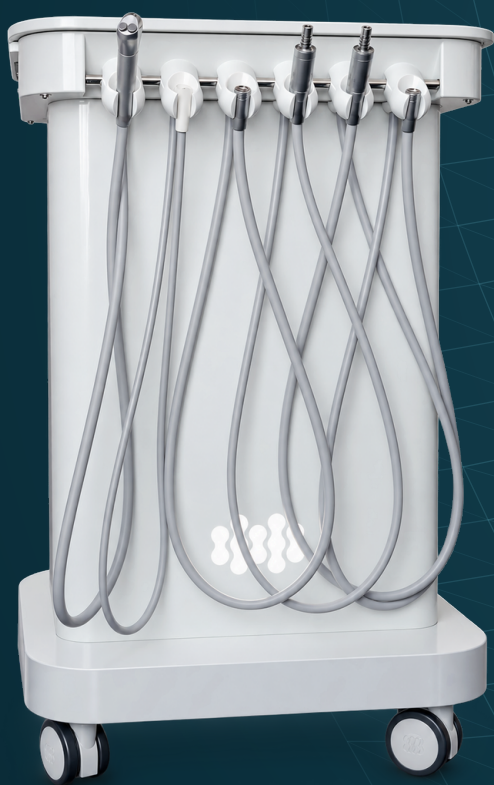

Kart Instrument

6 positions · Compresseur intégré

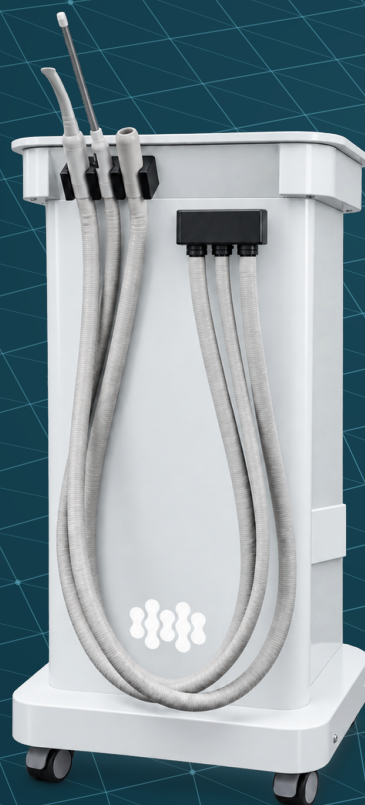

Kart Aspiration

3 voies · Unité indépendante



MINDSET

KARTS AUTONOMES • LE SYSTÈME

ORGANISER VOTRE ESPACE

Deux fonctions. Un poste qui s'adapte.

COMPRESSEUR ET RÉSERVES


Instrumentation

Le Kart Instrument réunit les instruments, le compresseur et les réserves embarquées. L'air et l'eau sont disponibles au niveau de l'unité.

UNITÉ DÉDIÉE

Aspiration

Le Kart Aspiration fonctionne sur une unité distincte, sans aspiration centralisée. Son emplacement s'adapte à l'organisation du poste de soins.

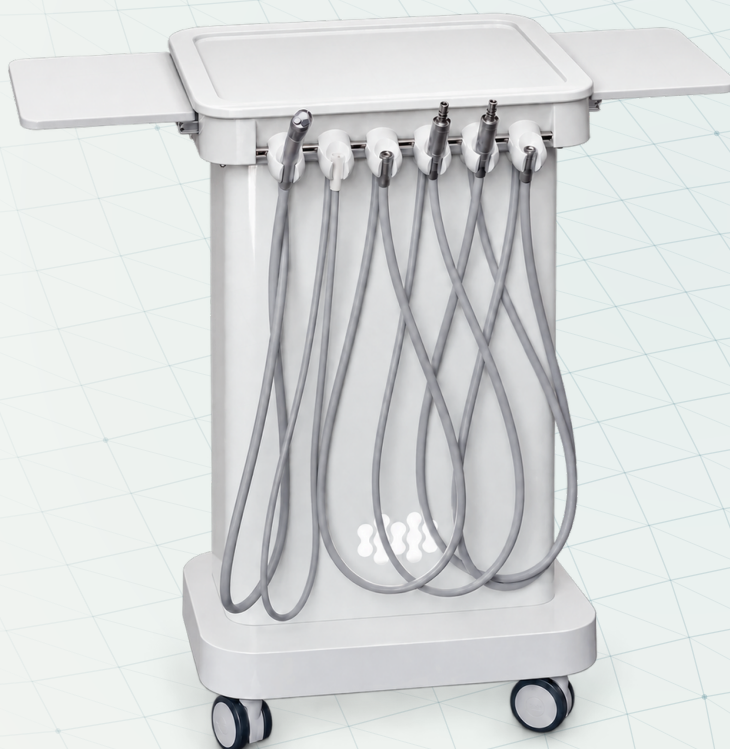

DEUX TABLETTES RÉTRACTABLES

Chaque kart se raccorde au secteur. L'emplacement, la circulation et les conditions de fonctionnement sont définis selon votre installation. Fauteuil et mobilier en supplément.




MINDSET

KARTS AUTONOMES · INSTRUMENTATION

KART INSTRUMENT

Six positions. Les réglages à portée de main.

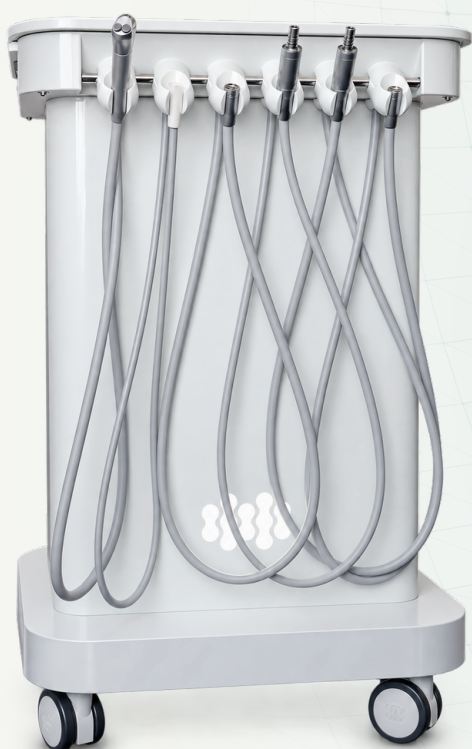

CONFIGURATION MINDSET · 6 POSITIONS

- 01 Seringue Air & Eau · 3 voies
- 02 Connecteur rapide · type détartreur LED / Woodpecker
- 03 Raccord turbine, aéropolisseur ou sableuse
- 04 Micromoteur Bien-Air MX LED avec régulateur
- 05 Micromoteur Bien-Air MX LED avec régulateur
- 06 Raccord turbine, aéropolisseur ou sableuse

Un plan de travail qui accompagne vos gestes.

Deux tablettes rétractables, des supports orientés, 2 prises électriques 220 V et 2 sorties pneumatiques extérieures complètent l'unité. Réglez l'air et l'eau, sélectionnez le spray par son commutateur puis commandez le fonctionnement à la pédale pneumatique.

Les raccords des positions 3 et 6 peuvent recevoir une turbine, un aéropolisseur ou une sableuse compatible. Ces instruments et les appareils de table se choisissent séparément.



VERSION YO-P209

L'instrumentation, dans le détail.

UNITÉ ET ALIMENTATION

Compresseur

Intégré, sans huile

Réservoir d'air comprimé

10 L

Eau propre

2 bouteilles de 1 L

Puissance apparente

600 VA

Pression de travail

0,5 à 0,7 MPa (5 à 7 bar)

Niveau sonore

58 dB

Puissance micromoteur

60 W

Prise auxiliaire

Prise européenne • appareil < 600 W

Châssis

Alliage d'aluminium

Dimensions produit

520 × 450 × 820 mm

Poids net / brut

67 kg / 84 kg

COMMANDES ET ENVIRONNEMENT

Réglages

Air/eau, puissance et inversion des micromoteurs ; manomètres

Seringue Air & Eau

Eau, air et spray

Ligne turbine grande vitesse

≥ 0,25 MPa • ≥ 40 L/min

Ligne basse vitesse

≥ 0,30 MPa • ≥ 40 L/min

Température d'utilisation

+5 à +40 °C

Humidité en utilisation

≤ 80 % HR

Pression atmosphérique

86 à 106 kPa

Transport et stockage

-10 à +55 °C • ≤ 90 % HR • 50 à 106 kPa

Caractéristiques de la version YO-P209. Réservoir d'air de 10 L distinct des deux bouteilles d'eau propre de 1 L. Instrumentation et version électrique précisées au devis. Raccordement selon la plaque signalétique ; entretien selon la notice.



MINDSET

KARTS AUTONOMES · ASPIRATION

KART ASPIRATION

Une aspiration dédiée. Un poste qui reste mobile.


VERSION YO-M400

3 voies

Deux aspirations de gros diamètre et une pompe à salive sur une unité indépendante.

PRISE EN MAIN

L'aspiration démarre à la prise d'une canule. L'arrêt intervient environ 10 secondes après la repose.

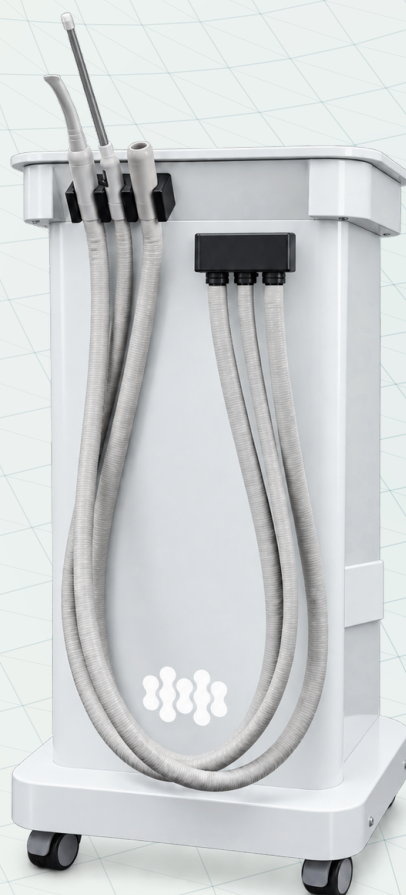

Un circuit accessible pour l'entretien.

Préfiltre amovible, séparation air/eau et cuve embarquée. La commande de vidange et le tuyau de sortie permettent d'évacuer les effluents. L'unité s'arrête lorsque la cuve atteint son volume utile.

Le système METASYS est proposé en option. La configuration et sa référence sont précisées au devis. Entretien des circuits selon la notice.



MINDSET

KARTS AUTONOMES · FICHE ASPIRATION

VERSION YO-M400

L'aspiration, dans le détail.

UNITÉ ET PERFORMANCES

Puissance apparente

590 VA

Débit d'aspiration maximal

1 600 L/min

Dépression maximale

-12 kPa

Niveau sonore

67 dB

Mode de fonctionnement

Intermittent

Voies d'aspiration

2 gros diamètres + 1 pompe à salive

Circuit

Préfiltre et séparateur air/eau

Réservoir d'eaux usées

3 L · arrêt au volume utile

Vidange

Commande électrique et tuyau souple

Fusible

15 A

DIMENSIONS ET ENVIRONNEMENT

Dimensions produit

413 × 430 × 850 mm

Poids net / brut

51 kg / 66 kg

Dimensions du colis

485 × 470 × 990 mm

Inclinaison à l'installation

2° maximum

Température d'utilisation

+5 à +40 °C

Humidité en utilisation

≤ 90 % HR

Pression atmosphérique

500 à 1 060 hPa

Transport et stockage

-10 à +55 °C · ≤ 90 % HR · 500 à 1 060 hPa

Caractéristiques de la version YO-M400. Débit et dépression : valeurs maximales de l'unité. Réservoir d'eaux usées de 3 L. Version électrique précisée au devis ; raccordement au secteur selon la plaque signalétique.



CHOISIR VOTRE CONFIGURATION

Un kart. Deux karts. Ou un poste complet.

Kart Instrument

SUR DEVIS

Unité d'instrumentation, compresseur, réserves et commande au pied. Instrumentation et accessoires détaillés dans votre proposition.

Kart Aspiration

SUR DEVIS

Unité mobile d'aspiration avec préfiltre, cuve et vidange. Système METASYS proposé séparément en option.

Pack Installation

SUR DEVIS

Fauteuil ACCESS ONE avec scialytique intégré, Kart Instrument et Kart Aspiration. Une composition définie pour votre espace de soins.

Les accessoires qui correspondent à votre pratique.

Turbines, aéropolisseurs, sableuses et appareils de table se sélectionnent selon les raccords et les besoins. Le devis précise la configuration retenue et les prestations associées.

Visuels de configurations illustrées. Les deux unités sont proposées séparément ; l'achat d'un kart n'inclut pas automatiquement l'autre unité ni le fauteuil.



ÉCHANGÉONS SUR VOTRE PROJET

Pensons votre poste de soins.

Des équipements complémentaires.
Une configuration précise, sur devis.

01 Définir l'implantation

Espace disponible, position du fauteuil, alimentation électrique et circulation dans la salle.

02 Composer la configuration

Unités, instrumentation, raccords et options choisis en fonction de votre organisation.

03 Préparer l'utilisation

Mise en service, formation et entretien des circuits selon les notices des équipements.

Parlons de votre installation.

info@mindset-global.eu ↗

06 50 06 91 31 ↗

Mindset Global SAS · 2 rue du Général de Gaulle, 35360 Montauban-de-Bretagne
SIREN 920 383 452 · TVA FR69920383452

mindset.dental ↗

Collection MINDSET · Septembre 2026. Visuels produits HD détournés à partir des photographies MINDSET, avec géométrie et configuration conservées. Équipements, options, prestations et garantie précisés au devis.